



Termómetro infrarrojo 31.1133.01
Para la medición de la
temperatura
corporal en la frente sin contacto



E

Breves instrucciones

1. 1. Descargue la app OUcare (IRT OUcare) de la tienda Apple app para su iPhone o de la tienda Google Play para su Smartphone Android, o sea, abra la app ya descargada.



Inicie la app OUcare



El botón todavía está pálido

2. Sitúe el interruptor O/S en la posición correcta del sistema operativo de su Smartphone. (Posición del interruptor 1 para Android, 2 para iOS).



3. Conecte el instrumento al enchufe de auriculares del Smartphone y extraiga la tapa de protección.




La superficie del botón de control se vuelve rica en contraste

Gírelo a un ángulo adecuado para su medición



4. Dirija el sensor hacia la frente. ¡Tenga la precaución de una distancia del sensor desde 1 a 3cm! El tiempo de medición es de aprox. 1 segundo. Durante la medición no se debe cambiar la distancia del sensor hasta la piel.

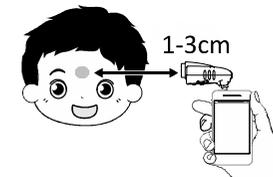

5. En la parte superior aparece el último usuario (1-9). Inicie la medición por el botón del display.




La temperatura medida se indica mediante respuesta vocal activada. Ahora el instrumento está preparado para una nueva medición. (Aviso L/H: temperatura está fuera de rango)

La medición de la temperatura del objeto

Tocando el botón de control



se cambia el modo de la medición de temperatura de un objeto.

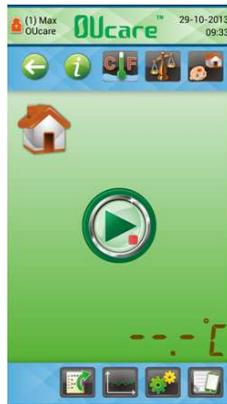

El procedimiento de medición es el mismo como en la medición de la temperatura de la frente. No hay ninguna respuesta vocal.

Funciones adicionales de la app IRT Oucare

Cambiar de °C a °F

- Toque el botón de control



y los valores de medición se mostrarán según deseo.

Compensación OFFSET

- Toque el botón de control



para efectuar un cambio, para variar un valor definido. Esta función está prevista solamente para mediciones de temperaturas corporales para, por ejemplo, ajustar la temperatura normal individual a 37°C.

Realizar ajustes definidos por el usuario

- Toque el botón de control



y llegará al ajuste de idioma. Algunos idiomas específicos sólo se pueden obtener mediante pago.



Respuesta vocal activada/desactivada



- Toque el botón de control



para llegar a la programación del usuario (máx. 9 usuarios). Elija un usuario.

- Toque el botón de control



para llegar a la programación de las direcciones e-mail (máx. 9) para enviar sus valores de medición (1ª línea: introducir nombre, 2ª línea: introducir la dirección e-mail)



- Toque el botón de control



y llegará a la programación de las direcciones SMS (máx. 5) para el envío de los valores de medición. (1ª línea: introducir nombre, 2ª línea: introducir el número del móvil.

- Toque el botón de control



y se mostrará el ajuste actual. El objeto de medición, la unidad de temperatura y la compensación Offset (en el caso de temperatura corporal) se pueden cambiar.

Presentación gráfica de los valores de medición

- Toque el botón de control



y llegará a la presentación de los valores de medición en un diagrama. Los valores T = valores individuales, el valor D = media del día y la presentación del objeto / temperatura corporal pueden cambiarse.

La lista de los valores registrados

- Toque el botón de control



y llegará a la lista de los valores de medición por orden cronológico.

Es posible un cambio de la presentación del objeto, temperatura corporal, llamada, envío y eliminación de valores individuales.

Toque el botón de control



para añadir un valor manualmente.

La indicación LED



rojo: contacto erróneo o batería agotada
verde: función correcta

AVISO

Desconecte el termómetro infrarrojo del Smartphone después de acabar la medición. Sólo entonces se desconecta automáticamente. En caso contrario, utiliza energía inútilmente.